

保証書

この度は弊社商品をご購入いただき誠に有難うございます。

ご購入日から1年を保証期間とさせていただきます。保証期間中に、取扱説明書に従った正常な使用状況において故障した場合には本書の記載内容に基づき無料修理いたしますので、お買い上げの販売店にご依頼いただけますようお願い申し上げます。

また、修理に際しては本書コピーをご提示ください。

【保証書についてお願い】

シリアルNo、ご購入日入店、お客様情報などの未記入箇所は、大変お手数ですがお客様ご自身でご記入の上、大切に保管してください。

製品名	CHIYODA ミニ遠心機
型番	CYD-C1008
シリアル No.	
ご購入日	

お客様

貴社名/ご所属機関名	
部署名/学部・研究室名	
ご担当者氏名	

販売店

会社名	
-----	--

- 保証期間中でも次のような場合は有料修理となります。
 - ①－使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②－お買い上げ後の落下、転倒および輸送等の振動による故障または損傷。
 - ③－火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - ④－本書の提示がない場合。
- 本保証書は培養物等の損傷に対する補償を行うものではありません。
- 弊社は東京を拠点としており、現地への出張修理は行っておりません。保証期間の内外に関わらず、修理の際は事前にご連絡の上、商品を弊社までご送付ください。なお、保証期間外の往復送料および諸費用はお客様のご負担となります。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

【保証期間延長について】

ウェブページから保証書登録をして頂くと、保証期間を15か月に延長し、別途保証書を発行させていただきます。

以下のQRコードからご登録ください。

製品に関するお問い合わせ

株式会社 チヨダサイエンス

東京都千代田区鍛冶町1-8-6
TEL:03-5294-7701 FAX:03-5294-7752
E-mail: technical@chiyoda-s.jp
Web: http://www.chiyoda-s.jp/

保証書登録は
こちらから



取扱説明書

型番 : CYD-C1008

CHIYODA ミニ遠心機



製品紹介：

CHIYODA ミニ遠心機は、低速での使用やマイクロ遠心チューブ（0.2ml～2.0ml）や 8 ポジションのPCR ストリップの迅速な遠心分離を目的として設計されたコンパクトな卓上遠心機です。



株式会社 チヨダサイエンス

仕様：

回転数： 6000 rpm / 2000xg

収容能力： 8 × 1.5/2.0ml
32 × 0.2ml または 4 × PCRストリップ

外形寸法： 14.5 (W) × 17.8 (D)
× 11.4 (H) cm

電源仕様： 100V~240V、50~60 Hz、50W

最大半径： 4.9cm

設置方法：

CHIYODAミニ遠心機を、電源プラグの抜き差しが容易に行えるコンセントの近くで、平らな水平面に設置してください。故障や事故の原因となりますので、熱源の近くや直射日光の当たる場所には絶対に設置しないでください。

ローターの交換：

本製品には、PCRチューブ（0.2mL）および8連PCRチューブ（PCRストリップ）用の交換用ローターが付属しています。付属のローターは、本体底面の収納スペースに収められています。取り出す際は、本体の底面から引き出してください。本製品はClik-n-Lok™（クリック・アンド・ロック）システムを採用しており、工具なしで瞬時にローターを交換できます。

【ローターの取り外し方】ローターを両手でしっかりと持ち、モーターシャフト（回転軸）から真上に向かって

真っ直ぐ引き抜きます。（工具は不要です）

【ローターの取り付け方】新しいローターの中心の穴をモーターシャフトに合わせます。「カチッ」と音がして奥まで確実に固定されるまで、ローターを真下に押し下げてください。（工具は不要です）

操作方法：

- 電源コードを電源に差込み、電源スイッチを「-」の位置（オン）にしてください。
- 蓋を開けて、サンプルをローターにセットしてください。必ずバランスが取れていることを確認してください（詳細については、次のセクション「ローターへのサンプルセット」をご覧ください）。
- 蓋を閉めると、ローターは瞬時に最高速度である6000 rpmまで加速します。
- 所定の運転時間が終了したら、蓋のボタンを押して蓋を開けてください。ローターは急速に減速して停止し、サンプルを取り出すことができます。


注意：ローターが完全に停止するまで、サンプルを取り出さうとしないでください。

ローターへのサンプルセット：


装置の安全な操作と長期使用を確保するため、サンプルは常にローターにバランスよくセットしてください。

チューブやストリップは、常に互いに対称に配置し、同じ量の液体を入れるようにしてください。図をご参照ください：

適切にバランスが取れたローターの例：

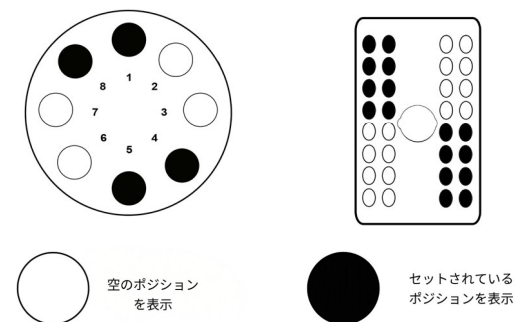

バランスが取れていないローターの例：

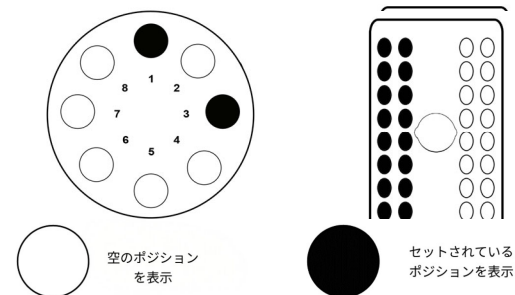

洗浄およびメンテナンス：

遠心機のローターは、取り外して洗浄できます。取り外したローターは、イソプロピルアルコールで洗浄するか、121°Cのオートクレーブで20分間滅菌することができます。